

# GÉZATONE



## СИЛИКОНОВАЯ ЩЕТКА МАССАЖЕР ДЛЯ ТЕЛА

AMG111

ДВОЙНОЙ ЭФФЕКТ  
ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ +  
ОМОЛОЖЕНИЕ

## РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЩЕТОЧКИ-МАССАЖЕРА AMG111 GEZATONE ОБЕСПЕЧИВАЕТ БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНОЕ ГЛУБОКОЕ ОЧИЩЕНИЕ, ЧЕМ ПРИ ОБЫЧНОМ МЫТЬЕ ПОД ДУШЕМ. УДОБНАЯ ЩЕТКА ЭРГОНОМИЧНОЙ ФОРМЫ С МЯГКИМИ СИЛИКОНОВЫМИ ЩЕТИНКАМИ БЕРЕЖНО, ТЩАТЕЛЬНО И ОЧЕНЬ ДЕЛИКАТНО УДАЛЯЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ, ИЗБЫТОК КОЖНОГО САЛА И ОРОГОВЕВШИЕ КЛЕТКИ ЭПИДЕРМИСА. НЕ ТРАВМИРУЕТ КОЖУ ТЕЛА, А ТАКЖЕ ПОВЫШАЕТ ТОНУС И УПРУГОСТЬ БЛАГОДАРЯ НЕСКОЛЬКИМ РЕЖИМАМ МАССАЖА.



ЗАГРЯЗНЕНИЕ,  
ЧЕРНЫЕ ТОЧКИ,  
РАСШИРЕННЫЕ  
ПОРЫ



СНИЖЕНИЕ  
ТОНУСА  
КОЖИ ТЕЛА



ШЕЛУШЕНИЕ  
КОЖИ ТЕЛА



ДРЯБЛОСТЬ,  
ВОЗРАСТНЫЕ  
ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ



ЗАСТОЙНЫЕ  
ПЯТНА И  
ИНФИЛЬТРАТЫ

В AMG111 СОЧЕТАЮТСЯ 6 РАЗЛИЧНЫХ РЕЖИМОВ ВОЗДЕЙСТВИЯ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОТОРЫХ ПОДАРИТ КОЖЕ ТЕЛА ТОНУС И ЧИСТОТУ

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

AMG111 ОБЕСПЕЧИВАЕТ ТЩАТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ ТЕЛА БЕЗ СКРАБОВ И ДРУГИХ ОТШЕЛУШИВАЮЩИХ СРЕДСТВ. МЯГКИЕ ЩЕТИНКИ ИЗ СИЛИКОНА НЕ ТРАВМИРУЮТ КОЖУ И СОЗДАЮТ ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА.


БЛАГОДАРЯ НЕСКОЛЬКИМ РЕЖИМАМ ВИБРАЦИИ, ЩЕТОЧКА ВЫБИВАЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ ИЗ ПОР.



НЕ  
ТРАВМИРУЕТ  
КОЖУ



ГЛУБОКО ОЧИЩАЕТ  
КОЖУ, УДАЛЯЕТ  
ЗАГРЯЗНЕНИЯ

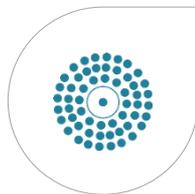

ГИПОАЛЛЕРГЕННЫЕ  
СИЛИКОНОВЫЕ  
ЩЕТИНКИ



ТОНИЗИРУЕТ  
КОЖУ, СУЖАЕТ  
ПОРЫ



МЯГКО  
МАССИРУЕТ КОЖУ,  
ПОВЫШАЕТ ТОНУС



ПОМОГАЕТ  
ИЗБАВИТЬСЯ ОТ  
«ЧЕРНЫХ ТОЧЕК»



УСИЛИВАЕТ  
ПРОНИКНОВЕНИЕ  
КОСМЕТИКИ



АКТИВИРУЕТ  
ЛИМФОДРЕНАЖ



СТИМУЛИРУЕТ  
КРОВО-  
ОБРАЩЕНИЕ



РАБОТАЕТ ОТ  
АККУМУЛЯТОРА



ДЛЯ ЖЕНЩИН  
И МУЖЧИН



2 ЦВЕТА  
НА ВЫБОР

## ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА



УДОБНО  
БРАТЬ С СОБОЙ



Арт. 1301249В – голубой  
Арт. 1301249Р – розовый

**КОМФОРТНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:** ВО ВРЕМЯ ОЧИЩЕНИЯ КОЖА НЕ ТРАВМИРУЕТСЯ И НЕ РАСТЯГИВАЕТСЯ БЛАГОДАРЯ МЯГКИМ СИЛИКОНОВЫМ ЩЕТИНКАМ

**ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА:** 6 РЕЖИМОВ ИНТЕНСИВНОСТИ ВОЗДЕЙСТВИЯ И СПЕЦИАЛЬНОЕ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЩЕТИНОК ОТ ТОНКИХ К БОЛЕЕ ТОЛСТЫМ, ОБЕСПЕЧИВАЮТ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ПРОЦЕССУ.

СОЧЕТАЕТ **ДВА ВИДА** ВОЗДЕЙСТВИЯ: ДЕЛИКАТНОЕ ТЩАТЕЛЬНОЕ ОЧИЩЕНИЕ И ТОНИЗИРУЮЩИЙ МАССАЖ.

ЩЕТИНКИ ИЗ ГИПОАЛЛЕРГЕННОГО СИЛИКОНА НЕ ПОВРЕЖДАЮТ И НЕ ТРАВМИРУЮТ КОЖУ, НЕ ВЫЗЫВАЮТ РАЗДРАЖЕНИЯ.

**НЕ БОИТСЯ ВОДЫ:** УСТРОЙСТВО ПОЛНОСТЬЮ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМО И ЕГО МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ В ДУШЕ. КЛАСС ЗАЩИТЫ ОТ ВОДЫ И ВЛАГИ - IPX5

**ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ:** ОЧИЩЕНИЕ ЗАНИМАЕТ ВСЕГО НЕСКОЛЬКО МИНУТ

6

6  
УРОВНЕЙ  
ИНТЕНСИВНОСТИ



ВОДО-  
НЕПРОНИЦАЕМЫЙ  
КОРПУС

3

3 УРОВНЯ  
ИНТЕНСИВНОСТИ  
ОЧИЩЕНИЯ




ЗАРЯДКА  
USB

3

3 УРОВНЯ  
ИНТЕНСИВНОСТИ  
МАССАЖА



## ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА

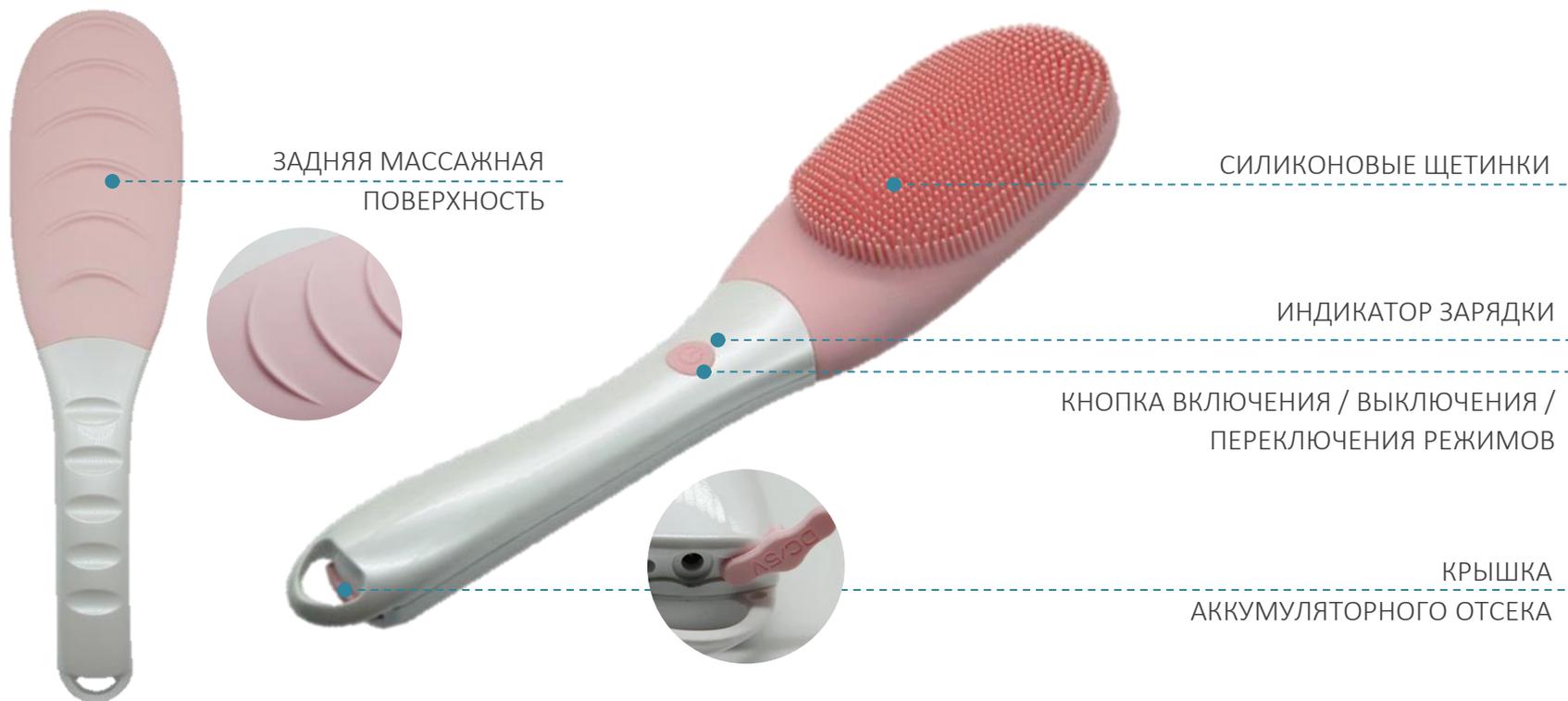

Арт. 1301249В – голубой  
Арт. 1301249Р – розовый



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ



ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ

## КОСМЕТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ПРОЦЕДУРЫ

ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША «CHOCO  
SHOWER GEL»



4516007 - 200 мл

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

КРЕМ – МАСЛО ДЛЯ ТЕЛА  
«CHOCO CREAM-BUTTER»



4516009 - 200 мл

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЙ КРЕМ  
BODY CREAM PHYTONONIC



4516207 - 100 мл

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

УВЛАЖНЯЮЩИЙ  
ФЛЮИД ДЛЯ ТЕЛА



4515722K – 300 мл

## КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ



На влажную кожу нанесите гель для душа. Немного геля нанесите на щетку.



Используя один из режимов, деликатно очистите кожу тела.



Смойте остатки геля струей теплой воды.



Выберите подходящий режим и проведите процедуру массажа, используя заднюю поверхность щетки.

**НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ** для очищения скрабы и другие абразивные средства, а также препараты на глиняной или спиртовой основе, они повреждают мягкие силиконовые щетинки.



## РЕЗУЛЬТАТЫ

- ОЧИЩЕНИЕ КОЖИ БЕЗ РАЗДРАЖЕНИЯ
- КОЖА В ТОНУСЕ И ПОДТЯНУТАЯ
- СОКРАЩЕНИЕ РАСШИРЕННЫХ ПОР, ЧЕРНЫХ ТОЧЕК И ПРОФИЛАКТИКА ИХ ПОЯВЛЕНИЯ
- ОЩУЩЕНИЕ КОМФОРТА И СВЕЖЕСТИ
- УМЕНЬШЕНИЕ ШЕЛУШЕНИЯ
- ПОВЫШЕНИЕ УПРУГОСТИ И ЭЛАСТИЧНОСТИ КОЖИ
- ПРОФИЛАКТИКА ВОСПАЛЕНИЙ
- ПРОФИЛАКТИКА ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО СТАРЕНИЯ
- АКТИВИЗАЦИЯ КРОВООБРАЩЕНИЯ
- СОКРАЩЕНИЕ ОТЕЧНОСТИ И ЗАСТОЙНЫХ ЯВЛЕНИЙ
- ОБЩЕЕ РЕЛАКСИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ, УСТРАНЕНИЕ СТРЕССА И УСТАЛОСТИ

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Арт. 1301249В – голубой  
Арт. 1301249Р – розовый



ШНУР USB  
В КОМПЛЕКТЕ



ИНСТРУКЦИЯ ПО  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

КОЛИЧЕСТВО РЕЖИМОВ РАБОТЫ: 6  
МАТЕРИАЛ: БЕЗОПАСНЫЙ ДЛЯ КОЖИ СИЛИКОН И АБС-ПЛАСТИК  
ВСТРОЕННЫЙ АККУМУЛЯТОР: 3,7 В , 1200мА\*ч  
ПАРАМЕТРЫ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА (в комплект не входит): DC 5В, не менее 500мА, разъем USB А.  
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЗАРЯДКИ: приблизительно 3,5 часа  
ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ: 0,86Вт  
ВЕС ПРИБОРА: 290г  
РАЗМЕР ПРИБОРА: 340 x 82 x 71 мм

### КОМПЛЕКТАЦИЯ

ЩЕТОЧКА-МАССАЖЕР AMG111 – 1 шт.  
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ – 1 шт.  
ШНУР USB ДЛЯ ЗАРЯДКИ – 1 шт.



сеть фирменных магазинов

СОЗВЕЗДИЕ КРАСОТЫ



Москва 8 (495) 120-10-80  
регионы РФ: 8(800) 500-95-94  
(звонок бесплатный)



<http://instagram.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.odnoklassniki.ru/sozvezdiekrasoty>



<https://www.facebook.com/sozvezdiekrasoti>



<http://vk.com/sozvezdiekrasoti>



<http://www.sozv.ru/>